

GÉZATONE

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР

для ухода за лицом

✓-Line модель
m1603

РАЗГЛАЖИВАЕТ

ВЫРАВНИВАЕТ

ПОДТЯГИВАЕТ

УКРЕПЛЯЕТ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ V-Line



- ✓ Если Вы житель мегаполиса с неблагоприятной экологической обстановкой
- ✓ Если Вы много работаете и чувствуете усталость
- ✓ Если Вам больше 35 лет
- ✓ Если Вы часто испытываете стресс и у Вас нарушены режимы сна и питания (несбалансированная диета).

То в результате проявляются **ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.**

- ✓ Расстройство микроциркуляции крови приводит к ухудшению цвета лица. Снижение скорости деления базальных клеток ведет к тому, что кожа, особенно сухая, становится похожей на пергамент и начинают формироваться мелкие морщины.
- ✓ Замедляется процесс восстановления волокон коллагена и эластина, в следствии чего кожа теряет упругость и эластичность.
- ✓ Накопление избыточного количества жидкости в тканях организма приводит к отекам.

СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОСМЕТОЛОГИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ

Мезотерапия: болезненно, есть риск травмировать поверхностные слои кожи.

Профессиональные аппараты требуют много времени и значительных финансовых затрат, требуют повторных процедур каждые 4-6 месяцев.

V-Line

Прибор V-Line Gezatone m-1603 позволит проводить процедуры с комфортом без боли и риска повреждений кожи.

Удобно. Можно проводить процедуры, где и когда удобно Вам.

Экономия денег и времени.



СПОСОБ РЕШЕНИЯ: RF-лифтинг *V-Line*

RF-ЛИФТИНГ – УНИКАЛЬНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МЕТОДИКА,
которая успешно зарекомендовала себя в эстетической косметологии.

RF – сокращенное от Radio Frequency, что означает электрический ток в радиочастотном диапазоне.


Принцип действия: Запатентованная методика воздействия на клетки кожи специальными импульсами строго определенной частоты, стимулирующими выработку клетками кожи собственного коллагена и эластина.

Оказывает влияние на глубокие структуры. Во время воздействия на кожу RF-волн этим прибором V-Line Gezatone m1603 Вы ощущаете тепло в глубоких слоях кожи. При этом происходит стимулирование и ускорение всех обменных процессов в коже, в результате которого происходит повышение эластичности и тонуса кожи за счет выработки собственного коллагена и эластина.

Непревзойденная эффективность методики RF-лифтинг. Естественный лифтинг становится заметным уже после первой процедуры. Через месяц ежедневного использования благодаря такому эффекту Вы получаете замечательный лифтинг и подтяжку тканей, которые продержатся не менее полугода.

ПРИНЦИП РАБОТЫ RF-лифтинг V-Line

Уникальная RF-технология, обеспечивающая эффективность и безопасность при использовании в домашних условиях

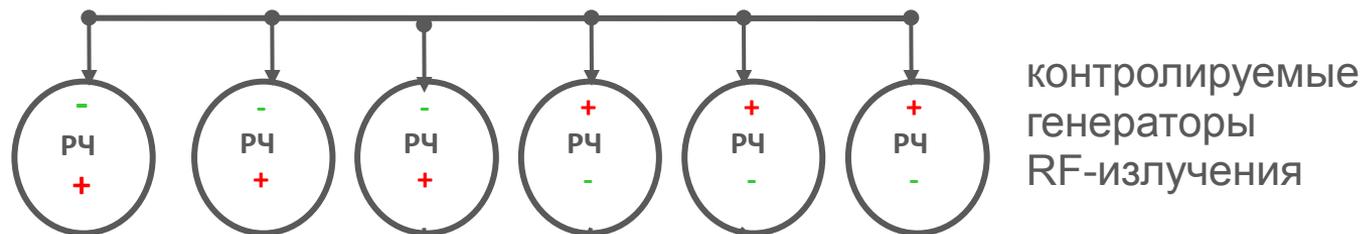

Электроды

- Использование программы 3D омоложения, основанной на RF-лифтинге, можно назвать революционным прорывом в современной косметологии.
- Метод позволяет безболезненно воздействовать на глубокие слои кожи, стимулируя производство коллагена и эластина.

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

V-Line

Сразу же после первой процедуры

Кожа выглядит более упругой, становится плотной и как бы «сияет» изнутри.

Кожа может слегка покраснеть после процедуры, покраснение исчезает в течение нескольких минут или в течении часа после процедуры. На отдельных участках Вы можете почувствовать тепло внутри кожи.

Через 4 недели

Вы заметите сокращение и уменьшение морщин, упругой и гладкой.


Через 12 недель

До 45% сокращения морщин и дряблости кожи, дальнейшее улучшение состояния Вашей кожи с течением времени на срок до шести месяцев.



РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА RF-лифтинг

V-Line

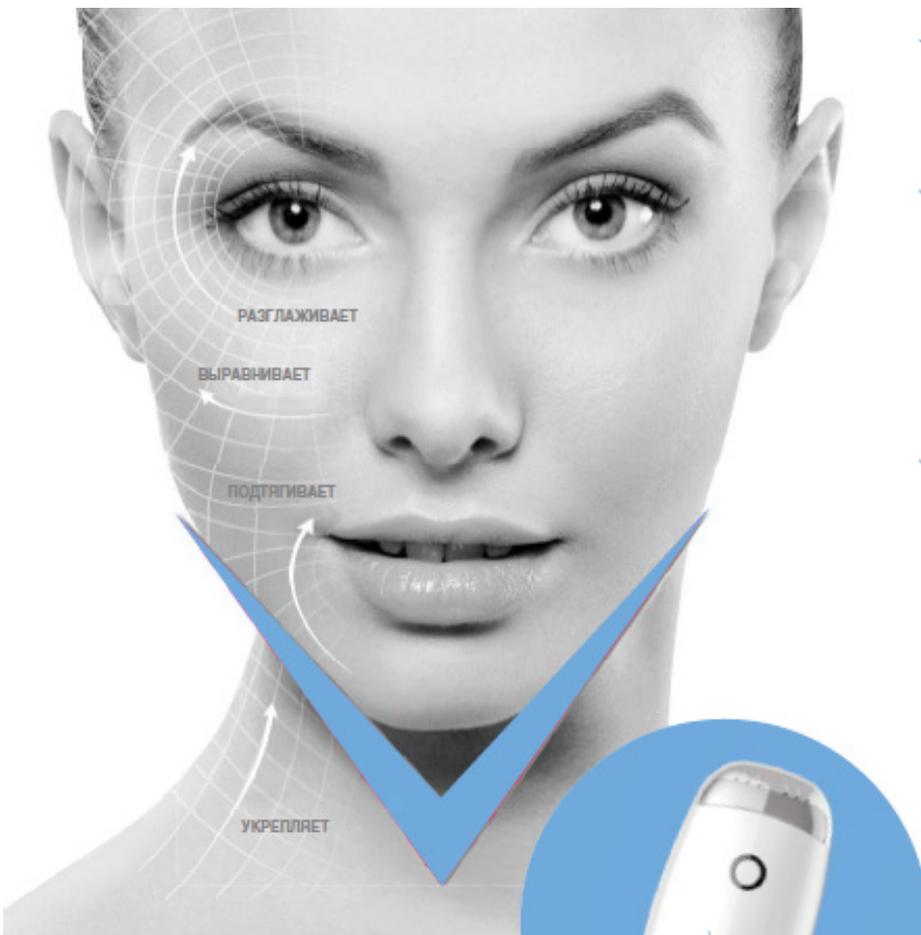

V-Line
модель m1603



- ✓ Коррекция морщин и разглаживание рельефа кожи.
- ✓ Восстановление структурного каркаса лица благодаря производству новых волокон коллагена и эластина.
- ✓ Восстановление нормальной работы сосудов, что приводит к улучшению тона кожи.
- ✓ Усиление действия косметических средств.
- ✓ Восстановление функций кожи на клеточном уровне.


ПРЕИМУЩЕСТВА

V-Line

- ✓ Самая передовая технология, используемая лучшими дерматологами, теперь доступна для домашнего применения.
- ✓ Совершенно безопасная система деликатного ухода.
- ✓ Немедленные и долговременные результаты, методика эффективна для всех типов кожи.
- ✓ Гибкий график процедур. Используйте V-Line Gezatone m1603, когда вам удобно, в комфорте своего дома.

**ЭФФЕКТ ЗАМЕТЕН УЖЕ ПОСЛЕ
ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ**

С каждым воздействием становится более выраженным и сохраняется до
6 МЕСЯЦЕВ

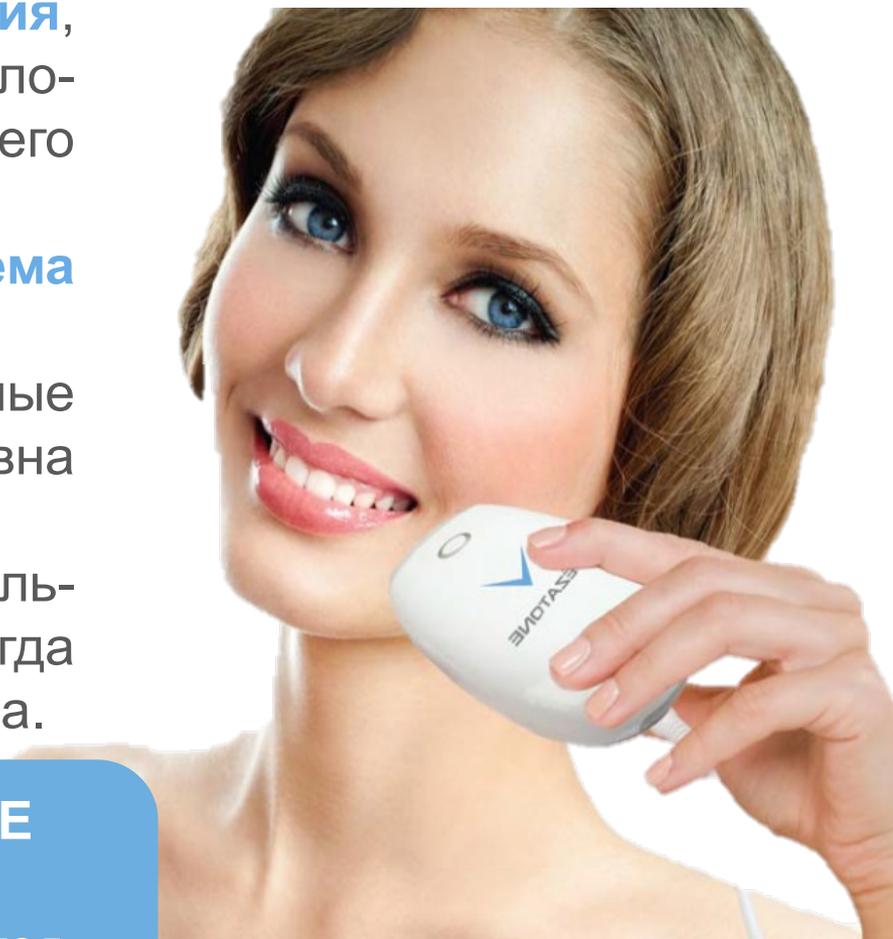

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ПРИБОРА *V-Line*



Разъем
подключения
к сети

Кнопка начала
работы с индикатором


Активные
электроды

Защитная
крышка



ОБЩИЙ ПЛАН ТЕРАПИИ ЛИЦА

V-Line

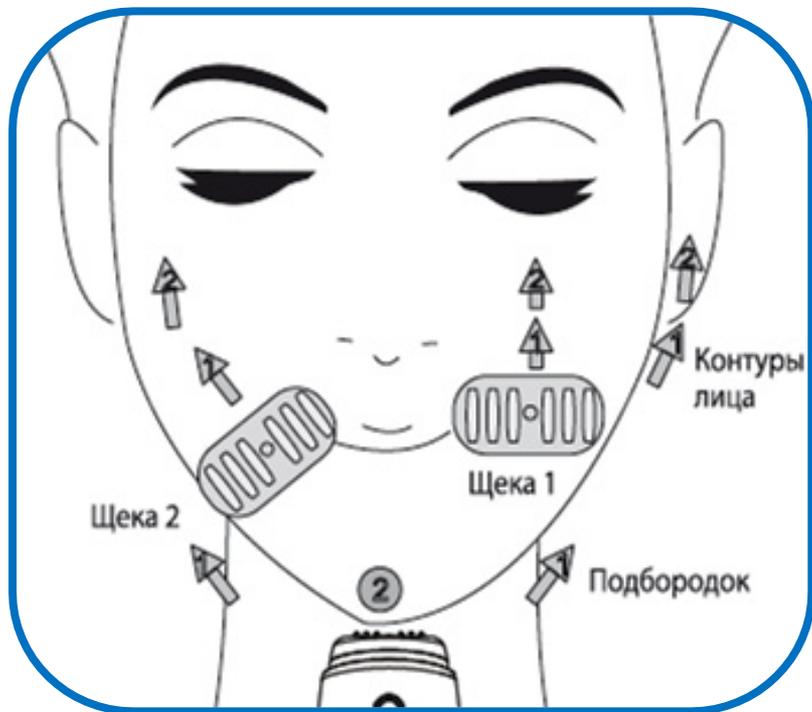

- ✓ Процедуру следует проводить один раз в день, не превышая 3-х минут воздействия на каждом из 5-ти участков.
 - ✓ Общая продолжительность процедуры не должна превышать 30 минут.
 - ✓ При использовании прибора следите, чтобы прибор не оставался неподвижно на одном месте. Медленно и непрерывно водите прибором по лицу.
 - ✓ С данным прибором необходимо использовать специальный защитный гель для RF-процедур.
-
- ✓ После процедуры, по желанию, Вы можете оставить гель на лице или удалить излишки. Рекомендуется так же нанести крем восстанавливающий после RF-лифтинга.
 - ✓ Для чувствительной кожи, склонной к покраснениям, рекомендуется использовать маски с успокаивающим действием.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

V-Line



**КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И
RF КОРРЕКЦИИ КОЖИ,
100 мл BEAUTY STYLE
Арт. 4515500**



**ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ПОСЛЕ
ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ
И RF- КОРРЕКЦИИ КОЖИ,
100 мл BEAUTY STYLE
Арт. 4515501**



**ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ**
Для ухода за чувствительной
и поврежденной кожей.
Эффекты: смягчение,
увлажнение, устранение
раздражения.



**ШЕЛКОВАЯ МАСКА ДЛЯ
ЛИЦА С ХИТОЗАНОМ**
Хитозан обладает
успокаивающим
свойством, он устраняет
покраснения и
воспаления.

- ✓ Прибор для домашнего RF-лифтинга следует использовать на здоровой коже.
- ✓ Запрещено использование детьми.
- ✓ Наличие кардиостимулятора или иных электронных имплантатов.
- ✓ Беременность и период лактации.
- ✓ Пациенты с острой формой заболеваний: туберкулез, лихорадка, инфекционные заболевания, болезни, передаваемые контактным путем.
- ✓ Люди с заболеваниями сердца.
- ✓ Люди с глазными болезнями или проходящие лечение от глазных болезней.
- ✓ Люди с кожными болезнями, аллергическим дерматитом и с чувствительной кожей.
- ✓ Купероз (сетка сосудов на лице).
- ✓ При наличии шрамов, покраснении, шелушении кожи, вызванном чрезмерным загаром.
- ✓ При наличии угревой сыпи и гнойных воспалительных процессов на коже.



GÉZATONE

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь!

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti